




Scan this code with your smart phone for additional TRUEresult information. Always refer to the Owner's Booklet for detailed product information.

## Checking Your Blood Glucose Using TRUEresult®

*A guide for testing your blood glucose*

### Simple Steps to Test Your Blood Glucose

## Meter, Test Strips & System Components

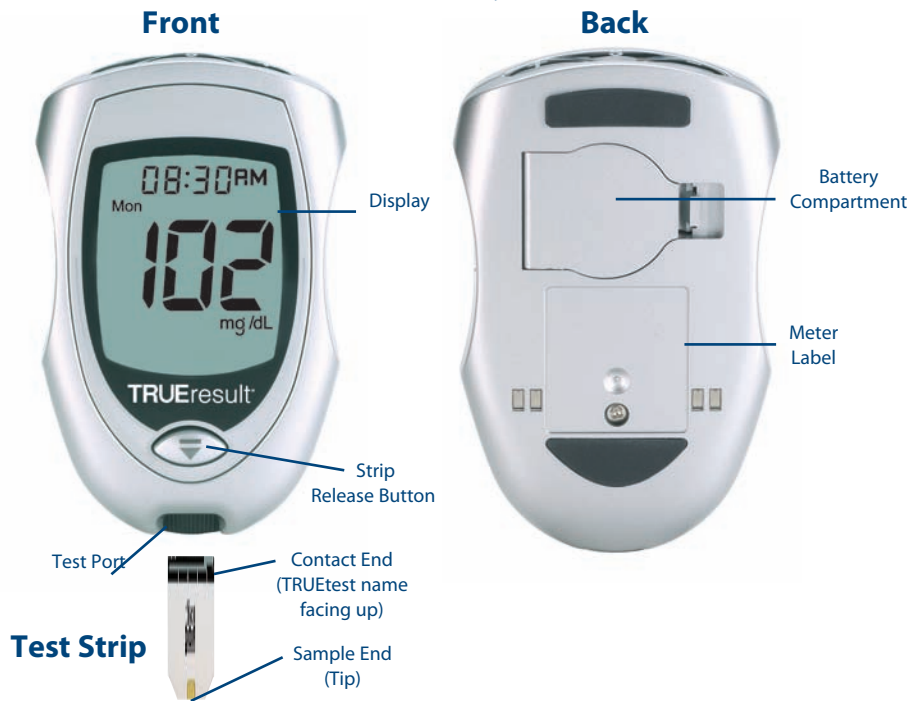

### Blood Glucose Testing



**1**

Wash your hands with warm, soapy water.



**2**

Remove Test Strip from vial and insert into Test Port with Contact End (TRUEtest name facing up). The Meter turns on.



**3**

Lance your finger.



**4**

Allow a blood drop to form, touch Tip of Strip to top of blood drop and allow blood to be drawn into Strip. Remove Test Strip Sample Tip from sample drop immediately after Meter beeps and dashes appear across Meter Display.

**CAUTION!** Holding the Strip to the sample too long after Meter begins testing may cause inaccurate results.



**5**

In as little as 4 seconds, glucose result will be displayed.



**6**

Hold Meter Strip pointing down. Press Strip Release Button to discard the used Strip.

#### WARNING!

**NEVER** reuse Test Strips. **NEVER** wipe Test Strips with water, alcohol or any cleaner. **DO NOT** attempt to remove blood or control sample from Test Strips or clean Test Strips and re-use. Reuse of Test Strips will cause inaccurate results. **NEVER** add a second drop of sample to the Strip. Adding more sample gives an error message.

This guide provides a brief overview on testing your blood glucose. For more information on the TRUEresult System, see your Owner's Booklet. For assistance using your TRUEresult System, call our Customer Care at 1-800-803-6025.

**NIPRO**  
DIAGNOSTICS™

# Control de la glucosa en la sangre con TRUeResult®

Guía para la prueba de glucosa en la sangre

## Pasos simples para realizar la prueba de glucosa en la sangre

### Medidor, tiras de prueba y componentes del sistema



### Pruebas de glucosa en la sangre



1

Lávese las manos con agua tibia y jabón.



2

Retire la tira de prueba del envase y colóquela en el puerto de prueba. El medidor se activa.



3

Aplique la lanceta en el dedo.



4

Deje que se forme una gota de sangre, toque la gota de sangre con la punta de la tira y deje que la sangre penetre en la tira. Retire la punta para la muestra de la tira de la gota de muestra inmediatamente después de que aparezcan guiones en la pantalla del medidor.

**¡PRECAUCIÓN!** Dejar la tira con la muestra demasiado tiempo después de que el medidor comience la prueba puede generar resultados inexactos.



5

En tan solo 4 segundos, se mostrará el resultado de la glucosa.



6

Sujete el medidor con la tira orientada hacia abajo. Presione el botón de liberación de la tira para desechar la tira utilizada.

#### ¡ADVERTENCIA!

**NUNCA** vuelva a utilizar las tiras de prueba. **NUNCA** limpie las tiras de prueba con agua, alcohol o limpiadores. **NO** intente eliminar la muestra de sangre o de control de las tiras de prueba, ni las limpie para volver a usarlas. Si vuelve a usar las tiras de prueba, los resultados pueden ser inexactos. **NUNCA** añada una segunda gota de muestra a la tira. Agregar más muestra genera un mensaje de error.

Esta guía proporciona una breve explicación general para realizar la prueba de glucosa en la sangre. Para obtener más información sobre el sistema TRUeResult, consulte su Libreta del propietario. Para obtener ayuda con el uso del sistema TRUeResult, llame a nuestro Departamento de Atención al Cliente al 1-800-803-6025.